




快適な寝心地と動きやすさを探求した  
静止型マットレス

# Nussaw

ナッソー（防水・清拭消毒タイプ）

「ナッソー」は通常の静止型マットレスより厚さがあり、  
特殊な構造により、患者・入居者様の快適な寝心地と動きやすさを探究しています  
さらなる進化として、2024年にマットレスカバーをリニューアルし、  
患者・入居者様とケア従事者様にとって、  
より衛生的にご使用いただけるようになりました


マット：快適な寝心地と動きやすさ  
高耐久ポリウレタンフォーム

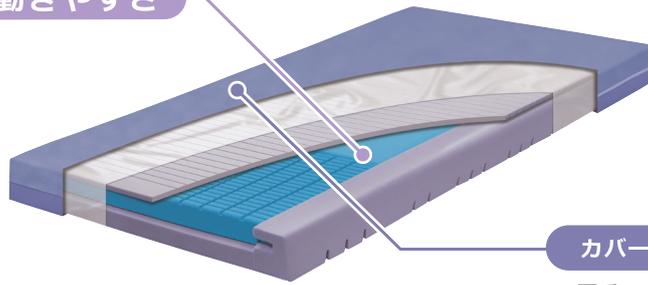

カバー：防水・臭い浸透軽減  
厚手 TPU 素材 + 溶着式 - 止水ファスナー

マット

快適な寝心地と動きやすさ（起き上がり・立ちあがり）

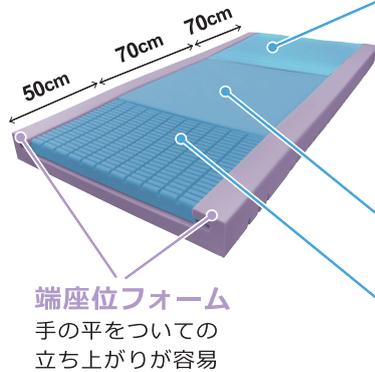

起き上がりフォームは、滑りやすい「ズレ対策シート」で覆われています  
ベッドの背上げ時には、ズレ対策シートが背中部分とのずれを軽減し、  
背中にかかる苦しい圧を対策します

カバー



マットレス内部への汚れ、臭い、液体の侵入を軽減

カバーの厚さと素材

独自開発の TPU フィルム は、従来の合成皮革製カバーよりも厚さを8倍向上させました  
フィルム厚さ（従来 20μ → 今回 170μ）で内部への臭いの浸透を軽減しました ※全周溶着式

溶着式 - 止水ファスナー

通常品のファスナーは、縫製加工のため、内部に液体が浸透します  
「溶着式 - 止水ファスナー」は、マットレス本体とファスナー部を溶着しているため、液体が内部へ侵入するのを軽減します

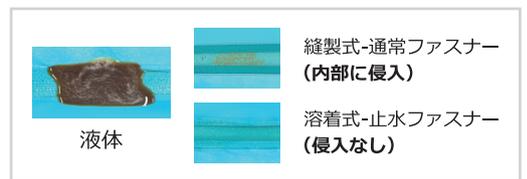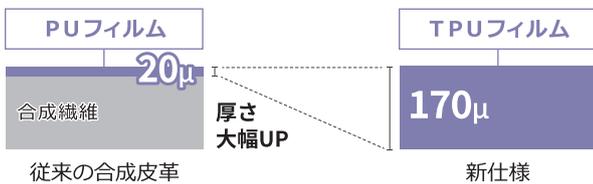

品番	マットサイズ (cm)			重量 (kg)	適合ベッドサイズ	
	幅	長さ	厚さ		幅	長さ
MNUS1383	83	191	13	8.1	83cm程度	レギュラー
MNUS1391	91	191	13	9.0	91cm程度	レギュラー

<素材>

- インナーマット：高耐久ポリウレタンフォーム
- ズレ対策シート：ナイロン
- カバー：熱可塑性ポリウレタン

