

「快適な眠りを誘う」特殊寝台付属品マットレス  
快適・衛生タイプ

# Sofia CC

ソフィア CC



## アウターカバー：除湿

吸水・拡散素材

**除 湿** カバーと人体（衣類・皮膚）の間で発生する湿度を  
吸収し拡散する、むれない快適性の機能

## インナーカバー：防水・臭い浸透防止

厚手 TPU 素材 + 溶着式 - 止水ファスナー

**防 水** しみこまない清拭消毒可能な特性

**臭い浸透防止** インナーのフィルムの厚み（通常品の8倍）  
+ 溶着式-止水ファスナーの機能


## マ ッ ト 部：快適な眠りを誘う

高耐久ポリウレタンフォーム

**選べる寝心地** かたさの異なるリバーシブル構造で、オモテ面ウラ面の選択が可能

**寝心地の良さと寝返りのしやすさ** 頭部・足部と背中・大腿部で異なるスリット形状により、沈みこみを抑制

**“へたり”にくさ** 特殊な中密度高反発系ポリウレタンフォームで、“へたり”が発生しにくい特性

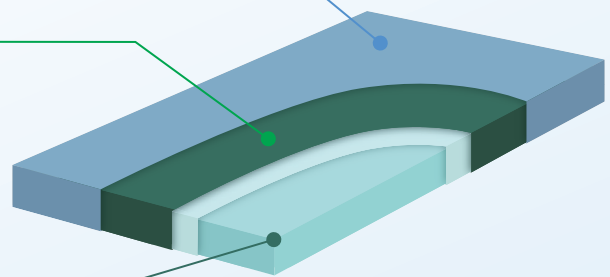

**NEW** やさしい肌ざわり・いつもサラサラ を提供する専用の除湿カバー

**やさしい肌ざわり**


厚みのある3層構造により、綿シーツとは異なる、やさしい肌ざわりを提供します

表面層：より細かく繊維を密集  
中間層：極細繊維  
裏面層：より細かく繊維を密集



**水分吸収・拡散性** によるサラサラ感

カバー表面についた汗などの水分を中間層の超極細繊維が素早く吸収し、拡散させます  
吸収した水分は表面層に戻らず、いつもサラサラで快適です

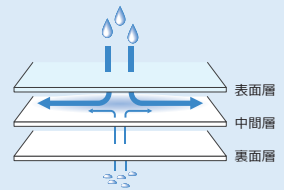


インナーカバー

**マットレス内部への汚れ、臭い、菌の侵入防止**

**インナーカバーの厚みと素材**

独自開発の TPU フィルム は、従来の合成皮革製カバーよりも厚みを8倍向上させました


フィルム厚み（従来 20μ → 今回 170μ）で内部への臭いの浸透を防止しました ※全周溶着式

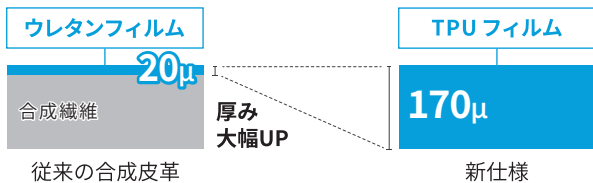

**溶着式 - 止水ファスナー**

一般的なファスナーは内部に液体が浸透します  
止水ファスナーは内部に液体は浸透しませんが、縫製加工の場合、針穴から浸透します

今回の溶着式 - 止水ファスナーは、液体をシャットアウトし、内部への侵入を防ぎます

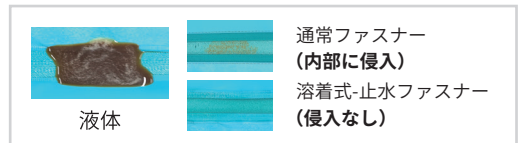


マット部

**「快適な眠りを誘う」特殊寝台付属品マットレス**


**好みに合わせて選べる寝心地**

かたさの異なるリバーシブル（両面）構造です  
やわらかめのオモテ面とかためのウラ面を好みで使い分けることができます

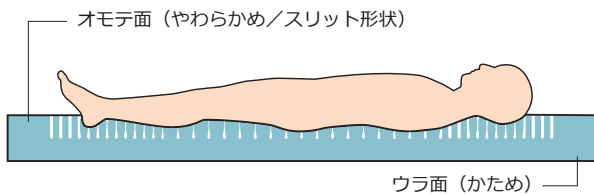

**寝心地のよさと寝返りのしやすさ**

頭部・足部は小さなスリットで体をやわらかく支え、背中～大腿部は大きなスリットで体の沈み込みを抑えることで、寝心地のよさと寝返りのしやすさを両立しています

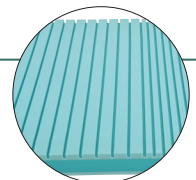

スリット形状

**“へたり”にくさ**

特殊な中密度高反発系ウレタンフォームにより、長期間使用による“へたり”を発生しにくくしています

製品名	品番	TAISコード	マットサイズ			重量
			幅	長さ	厚さ	
ソフィア CC	MHACC1083	00054-000671	83	191	10	6.9
	MHACC1091	00054-000672	91	191	10	7.4
	MHACC1083S	00054-000673	83	180	10	6.4
	MHACC1091S	00054-000674	91	180	10	6.9

<素材>

- アウターカバー：ポリエステル
- インナーカバー：熱可塑性ポリウレタン
- インナー保護フィルム：ポリエチレン
- マット部：高耐久ポリウレタンフォーム

開発・販売・製造 医療・福祉機器 総合メーカー 健康用品事業本部 www.molten.co.jp/health 株式会社 **モルテン** 東京/札幌/仙台/さいたま/名古屋/大阪/広島/福岡



ISO9001 認証取得  
ISO13485 認証取得  
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得