

「質感が選べる」特殊寝台付属品マットレス
快適・衛生タイプ

Tellisa CC

テルサ CC



アウターカバー：除湿

吸水・拡散素材

除 湿 カバーと人体（衣類・皮膚）の間で発生する湿度を
吸収し拡散する、むれない快適性の機能

インナーカバー：防水・臭い浸透防止

厚手 TPU 素材 + 溶着式 - 止水ファスナー

防 水 浸みこまない清拭消毒可能な特性

臭い浸透防止 インナーのフィルムの厚み（通常品の8倍）
+ 溶着式-止水ファスナーの機能

マ ッ ト 部：質感が選べる

高耐久ポリウレタンフォーム

優れた体圧分散性能 従来の標準マットレスよりも厚みをもたせることで、体圧分散性能と質感が向上

選べる質感 リバーシブルによる選択と、部分交換による選択が可能

端座位の安定性 両サイドに、かためのウレタンフォームを埋め込むことで安全な立ち上がりをサポート

PAT.

NEW やさしい肌ざわり・いつもサラサラ を提供する専用の除湿カバー

やさしい肌ざわり


厚みのある3層構造により、綿シーツとは異なる、やさしい肌ざわりを提供します

表面層：より細かく繊維を密集
中間層：極細繊維
裏面層：より細かく繊維を密集



水分吸収・拡散性 によるサラサラ感

カバー表面についた汗などの水分を中間層の超極細繊維が素早く吸収し、拡散させます
吸収した水分は表面層に戻らず、いつもサラサラで快適です

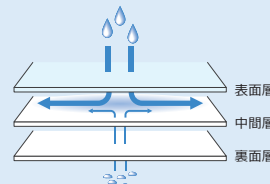


マットレス内部への汚れ、臭い、菌の侵入防止

インナーカバーの厚みと素材

独自開発の TPU フィルム は、従来の合成皮革製カバーよりも厚みを8倍向上させました


フィルム厚み（従来 20μ → 今回 170μ）で内部への臭いの浸透を防止しました ※全周溶着式

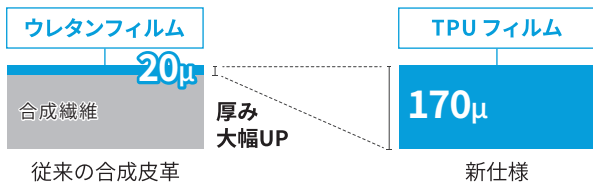

溶着式 - 止水ファスナー


一般的なファスナーは内部に液体が浸透します
止水ファスナーは内部に液体は浸透しませんが、縫製加工の場合、針穴から浸透します

今回の溶着式 - 止水ファスナーは、液体をシャットアウトし、内部への侵入を防ぎます

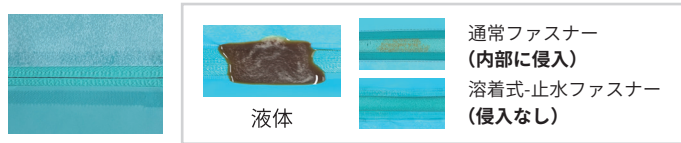

「質感が選べる」特殊寝台付属品マットレス

優れた体圧分散性能

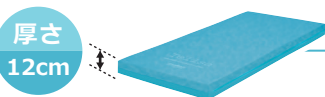

従来の標準マットレスよりも厚みをもたせることで、体圧分散性能と質感が向上し、さまざまな利用者様とケアのニーズに対応することができます

端座位の安定性

マットレスの両サイドに、よりかためのウレタンフォームを埋め込むことで、端座位が安定し、安全な立ち上がりをサポートします



選べる質感

<リバーシブルによる選択>

身体をやさしくつつみ込む【やわらか面】

寝返りのしやすい【しっかり面】



<部分交換による選択>

やわらか面

しっかり面



製品名	品番	TAISコード	マットサイズ			重量
			幅	長さ	厚さ	
テルサ CC	MTLSCC1283	00054-000667	83	191	12	7.4
	MTLSCC1291	00054-000668	91	191	12	7.9
	MTLSCC1283S	00054-000669	83	180	12	6.9
	MTLSCC1291S	00054-000670	91	180	12	7.4

- <素材>**
- アウターカバー：ポリエステル
 - インナーカバー：熱可塑性ポリウレタン
 - インナー保護フィルム：ポリエチレン
 - マット部：高耐久ポリウレタンフォーム



ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得