

やさしく安心の座り心地を実現した新素材・新構造の車いす用クッション


RESPO.

レスポ

介護保険福祉用具貸与品：車いす付属品

障がい者総合支援

対象者 車いすや座位の姿勢で長時間過ごす人

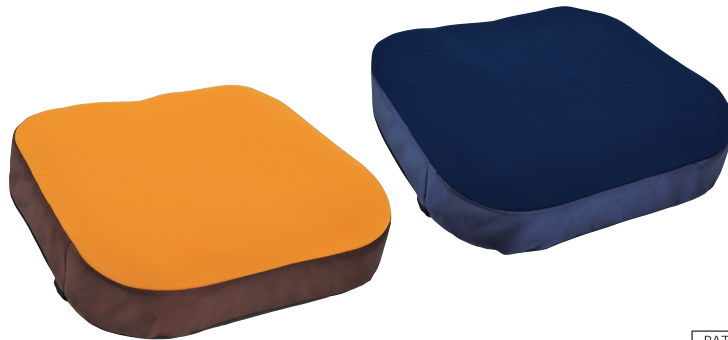

PAT.

1. やさしく安心の座り心地を実現

立体セル形状の特殊流動体バッグと立体形状のベースクッションとベースプレートを組み合わせることで、優れた体圧分散性能と座位保持性能を両立しています。座るだけで最適な形状に変形し、やわらかく、やさしい座り心地を実現しています。

特殊流動体バッグ
(立体セル形状)

ベースクッション



ベースプレート

2. 優れた座位保持性能


座るだけで最適な形状に変形し、形状を保持することで優れた座位保持性能を実現しています。最下層のベースプレートがスリングシートのため、座位の安定感を向上しています。

〈従来品〉



スリングシート

〈レスポ〉

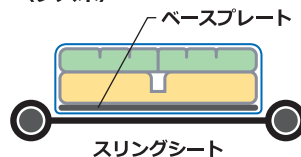

スリングシート

3. 優れた体圧分散性能

立体セル形状バッグのスリットが、尾骨部や坐骨結節部などの骨突出部を包み込むことで、ハンモック現象による圧の集中を防ぎ、体圧分散性能を向上させています。

4. 衛生面の対策

カバーは取り外して洗濯機での丸洗いができます。特殊流動体バッグとベースクッションは、どちらも完全防水で汚れが染み込みません。万が一汚れた場合は、簡単に清拭することができます。

5. 立体構造カバーによるむれ対策

表面に通気孔を設けた立体構造カバーは通気性に優れ、むれを対策します。取り外して洗濯することもできます。

カラー	品番	TAISコード	サイズ(cm)			重量(kg)	価格
			幅	長さ	厚さ		
ネイビー	MRSPNV	00054-000120	38.5	38.5	8.5	2.8	36,300円 (税抜価格33,000円)
オレンジ	MRSPOR						

【オプション】

- カバー単体
ネイビー：MRSPNVCV 8,712円 (税抜価格7,920円)
オレンジ：MRSPORCV 8,712円 (税抜価格7,920円)

<素材> ●クッション部：特殊流動体 ●ベースクッション部：ウレタンフォーム ●ベースプレート：発泡ポリエチレン
●カバー表面：ポリエステル ●カバー裏面：ナイロン（滑り止め加工）



ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得